

P

Lingaduras de baixa elasticidade para de compressão.**Modo de aplicação:**

Recomendamos que a ligadura seja aplicada por uma pessoa treinada para o efeito.

Indicações:

Ligaduras de compressão para flebologia como auxiliar da bomba muscular e para melhorar a hemodinâmica do refluxo venoso, bem como para o descongestionamento venoso e linfático, por ex varicose, insuficiência venosa crônica, inclusive úlcera venosa e edema venoso, tromboflebite, flebotrombose, após cirurgia (stripping), após obliterações, linfedemas primários e secundários.

Contra-indicações:

Doença arterial aguda das extremidades, insuficiência cardíaca descompensada, flebite séptica, flegmasia coerulea dolens.

Elasticidade no sentido longitudinal:

Compridur®: aprox. 50%

Comprihaft®: aprox. 75%

Comprilan®: aprox. 90%

Indicações especiais:

Apenas para Comprihaft®: desenrolar primeiro cerca de 20-30 cm da ligadura antes de a colocar. Só assim se garante um contínuo alívio de pressão no sentido distal para proximal.

Sugestão:

Como almofadado aconselhamos Artiflex® ou Soffban® e para a fixação final Leukoplast®.

DK

Elastische bind som kompressionsforbinding.**Brugsvejledning:**

Vi anbefaler, at bandageringen udføres af en erfaren behandler.

Indikationer:

Kompressionsforbinding ved venøse og lymphatiske lidelser til understøttelse af muskelpumpen, forbedring af den venøse tilbagestromning samt forebyggelse af venøse og lymphatisk stase, f.eks. åreknuder, kronisk venøs insufficiens med skinnebebenså, venøst ødem, thromboflebitis, venethrombose, efter veneoperationer, efter behandling af åreknuder eller primært og sekundært lymfeødem.

Kontraindikationer:

Fremskredet perifer ateriel afslukning, dekomprimeret hjerteinsufficiens, septisk flebitis, flegmasia coerulea dolens.

Længdeelasticitet:

Compridur®: ca. 50%

Comprihaft®: ca. 75%

Comprilan®: ca. 90%

Specielle henvisninger:

Kun Comprihaft®. Rul først et ca. 20-30 cm langt stykke bind op, inden bandagen anlægges. Kun derved kan man sikre sig et kontinuerligt tryk fra distal til proximalt.

Anbefaling:

Som polstermateriale anbefaler vi Artiflex® eller Soffban®, til fiksering af endestykket Leukoplast®.

J

ショートストレッチ包帯**適用**

静脈血・リンパ還流時の筋肉ポンプサポート作用

以下の疾患における静脈還流の維持

例：静脈瘤、慢性静脈疾患（静脈下腿潰瘍、静脈性浮腫、血栓靜脈炎、静脈血栓症、静脈の術後（スドリッピング）、閉塞後、一次性ならびに二次性リンパ浮腫）




禁忌

重症の末梢動脈閉塞疾患、非代償性心不全、感染性静脈炎、有痛性青斑性


縦方向の伸縮度

約75%

約90%

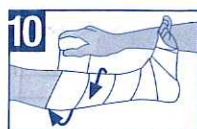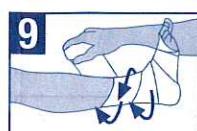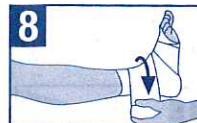


**Method 2
(drawings 1-4)**

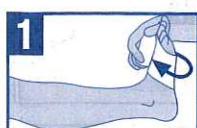

Part-Nr. 558055 R1

Made in Germany

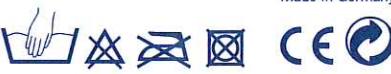

Comprihaft®: Baumwollgewebe mit mikroporöser Latexbeschichtung
Cotton with a microporous latex layer

4605018/44.04