

P

Ligaduras de baixa elasticidade para de compressão.

Modo de aplicação:

Recomendamos que a ligadura seja aplicada por uma pessoa treinada para o efeito.

Indicações:

Ligaduras de compressão para flebologia como auxiliar da bomba muscular e para melhorar a hemodinâmica do refluxo venoso, bem como para o decongestionamento venoso e linfático, por ex varicose, insuficiência venosa crônica, inclusive úlcera venosa e edema venoso, tromboflebite, flebotrombose, após cirurgia (stripping), após obliterações, linfedemas primários e secundários.

Contra-indicações:

Doença arterial aguda das extremidades, insuficiência cardíaca descompensada, flebite séptica, flegmasia coerulea dolens.

Elasticidade no sentido longitudinal:

Compridur®:	aprox. 50%
Comprihaft®:	aprox. 75%
Comprilan®:	aprox. 90%

Indicações especiais:

Apenas para **Comprihaft®**: desenrolar primeiro cerca de 20-30 cm da ligadura antes de a colocar. Só assim se garante um contínuo alívio de pressão no sentido distal para proximal.

Sugestão:

Como almofadado aconselhamos **Artiflex®** ou **Soffban®** e para a fixação final **Leukoplast®**.

DK

Elastiske bind som kompressionsforbinding.

Brugsvejledning:

Vi anbefaler, at bandageringen udføres af en erfaren behandler.

Indikationer:

Kompressionsforbinding ved venøse og lymfatiske lidelser til understøttelse af muskelpumpen, forbedring af den venøse tilbagestrømning samt forebyggelse af venøse og lymfatiske stase, f.eks. åreknuder, kronisk venøs insufficiens med skinnebensår, venøst ødem, thromboflebitis, venethrombose, efter veneoperationer, efter behandling af åreknuder eller primært og sekundært lymfeødem.

Kontraindikationer:

Fremskredet perifer arteriel aflukning, dekomenseret hjerteinsufficiens, septisk flebitis, flegmasia coerulea dolens.

Længdeelasticitet:

Compridur®:	ca. 50%
Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Specielle henvisninger:

Kun **Comprihaft®**: Rul først et ca. 20-30 cm langt stykke bind op, inden bandagen anlægges. Kun derved kan man sikre sig et kontinuerligt tryk fra distal til proximalt.

Anbefaling:

Som polstermateriale anbefaler vi **Artiflex®** eller **Soffban®**, til fiksering af endestykket **Leukoplast®**.

J

ショートストレッチ包帯

適用

静脈血・リンパ還流時の筋肉ポンプサポート作用

以下の疾患における静脈還流の維持

例：静脈瘤、慢性静脈疾患（静脈下腿潰瘍、静脈性浮腫、血栓静脈炎、静脈血栓症、静脈の術後（ストリッピング）、閉塞後、一次性ならびに、二次性リンパ浮腫）

禁忌

重症の末梢動脈閉塞疾患、非代償性心不全、感染性静脈炎、有痛性青股性

縦方向の伸縮度


コンプリハフト	約75%
コンプリラン	約90%

特記事項（コンプリハフトご使用時のみ適用）


末梢から近位に向かって一定の減圧を確保するために、包帯は常に体から20~30cm離れた状態を保持して巻いてください。

推奨事項

パッティング材としてアーティフレックス、また、固定にはロイコプラストのご使用を推奨しております。

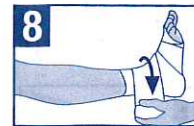

Method 2 (drawings 1-4)

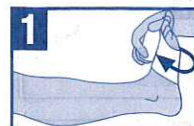

Comprihaft®: Baumwollgewebe mit mikroporöser Latexbeschichtung
Cotton with a microporous latex layer



Part-Nr. 558055 R1
Made in Germany

