




1

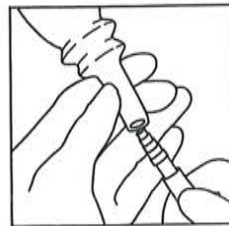


2

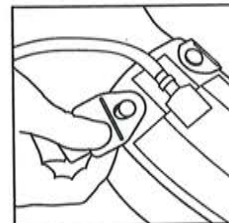

3a

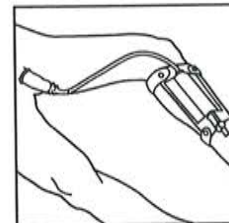

3b

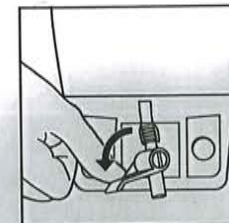

4

## US Vented Urinary Leg Bag Combination Pack

### Instructions

*Make sure extension tubing is not kinked or obstructed.*

1. Close drain valve.
2. Insert tubing into the bottom of the catheter. Attach extension tubing to connector at top of leg bag.
- 3a. Attach leg bag straps; adjust so they are comfortable and secure.
- 3b. System is in place.
4. Open leg bag drain valve. Empty contents. Close drain valve.

## ES Sistema Completo para Bolsa de Orina de Pierna con Débito Rápido

### Instrucciones de Uso

*Asegúrese que el tubo de drenaje no esté doblado ni obstruido.*

1. Cierre la válvula de vaciado.
2. Introduzca el conector del tubo de drenaje en la parte inferior del colector. Conecte el otro extremo del tubo de drenaje al conector de la bolsa, situado en la parte superior de la misma.
- 3a. Coloque las ligas a la bolsa de pierna; ajustándolas de modo que queden cómodas y seguras.
- 3b. La bolsa queda así colocada.
4. Abra la válvula de vaciado de la bolsa. Vacíe su contenido. Cierre la válvula de vaciado.

## FR Set de poche de jambe à débit rapide

### Mode d'emploi

*S'assurer que la tubulure n'est ni pliée ni obstruée.*

1. Fermer le robinet de vidange.
2. Insérer la tubulure dans l'étui pénien. La fixer au connecteur qui se trouve en haut de la poche de jambe.
- 3a. Fixer les lanières de la poches de jambe et les ajuster pour qu'elles soient correctement et confortablement mises en place.
- 3b. Le système est en place.
4. Ouvrir le robinet de vidange de la poche de jambe. Vider son contenu. Fermer le robinet de vidange.